


Monteringsanvisning E-Walk på Kuschall Compact

MCG1141

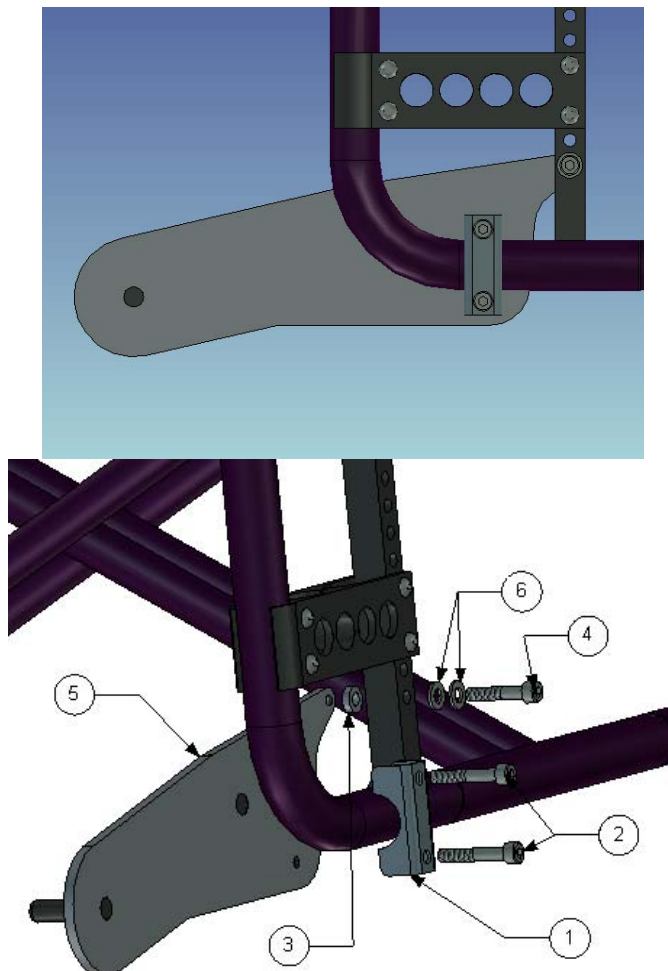

Montering av fästet på höger sida.

1. Demontera hjulet.
2. Montera nu fästet enligt bilden ovan.

För montering så skall följande ingå.

Placering.	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	100 500 025	1	Klamma 25 mm
2	XSM6X35	2	Skruv M6 x 35
3	100 400 025	1	Distans 12x6x3,6
4	XSM6X30	1	Skruv M6 x 30
5	MCG1141R	1	Höger platta
6	XSM6BR	2	Plan Bricka 6,4