

decon
mobility



_DREEFT
E P P U R



Een uniek remsysteem voor handbewogen rolstoelen. Een set wielen om mee af te remmen en te sturen met minimale belasting/inspanning.

Geïnspireerd op de Nederlandse fietsen, bevatten Dreeft-wielen een uniek "terugtrap" remsysteem in de naaf van het wiel, waarmee de gebruiker de rem kan activeren door de hoepel(s) lichtjes naar achteren te trekken. Met de Dreeft-wielen kunt u afremmen, draaien en achteruitrijden zonder enige wrijving aan de handen en met 5x minder inspanning!

Bij het remmen en sturen, draaien de hoepels niet mee in de handen. Geen wrijving en warmteontwikkeling in de handen meer. Dit maakt Dreeft wielen bijzonder nuttig voor het besturen van uw rolstoel in combinatie met een elektrische hulpaandrijving, zoals de Yomper.


Een unieke rijervaring!

Specificaties

Wielmaten	24"
Maximaal gebruikersgewicht	120 kg
Banden	Schwalbe Marathon+ 25-540
Totaalgewicht	3750 g
Asdiameter	12mm & 12,7mm
Hoepels	Dubbelwandig aluminium



Scan de QR-code voor meer informatie.

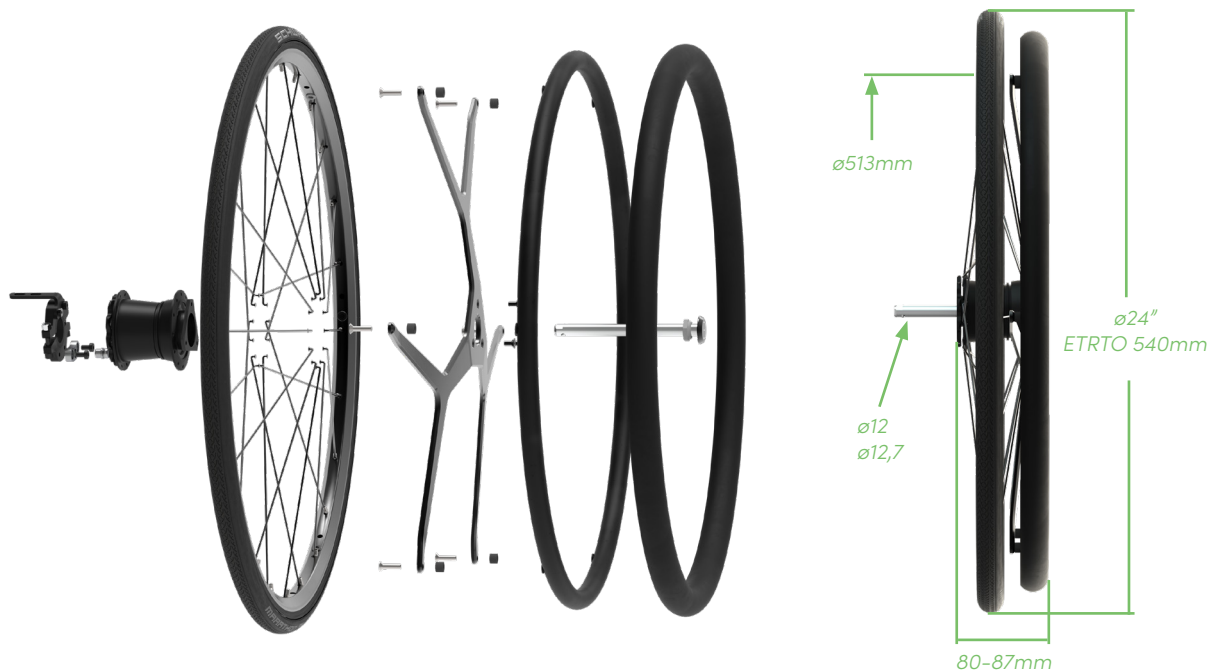

Een unieke toegepaste technologie in de naaf van de wielen.

Geïnspireerd op het principe van de "terugtraprem" die op Nederlandse fietsen te vinden is. De Dreeft-wielen hebben een gepatenteerd remsysteem in de naaf van het wiel.



Geen wrijving

Bij het remmen blijven de hoepels ten opzichte van de hand stil staan. Ongewenste wrijving en warmteontwikkeling verdwijnen volledig.



80% minder kracht

Vergeleken met standaard wielen (minder schouderklachten).



Te combineren met elektrische aandrijfhulpen

Zeer gemakkelijk sturen en remmen i.c.m. een elektrische hulpaandrijving onder/achter de rolstoel. Ook heuvel op en af.



Geschikt voor para- en quadriplegie

Te gebruiken zonder hard te knijpen, zelfs bij regen!



Normaal gesproken betekent remmen of sturen met een rolstoel dat u uw handenpalmen als "remmen" gebruikt, wat schouderpijn en wrijving in de handenpalmen kan veroorzaken. Dankzij de Dreeft wielen remt en stuurt u voortaan heel gemakkelijk met uw vingertoppen, zonder inspanning of wrijving!

Trek de hoepels lichtjes naar achteren om het remsysteem te activeren.



Scan de QR-code voor meer informatie.

Samen kunnen we vrijheid creëren!

Volg ons:



deconmobility.nl

