



Mer kraft och ökad säkerhet

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER GEARWHEEL?

- 1 par Gearwheel i storlek 22", 24" eller 25"
- Finmönstrad däck
- QR-axel
- Ekerskydd
- Bruksanvisning
- 2 Års garanti



GEARWHEELS växlingsbara rullstolshjul är anpassat för manuella rullstolar. Den patenterade lösningen kombinerar möjligheten att på ett smidigt och enkelt sätt skifta mellan de två växlar som är inbyggda i vardera hjul och inkluderar även en backspärr, som hindrar rullstolen från att rulla bakåt vid användning i uppförlägen. Användandet och en designen skiljer sig inte nämnvärt från vanliga rullstolshjul. Körning uppför eller i olika miljöer blir bara smidigare och tryggare.

TEKNISKA FAKTA

Vikt	2,920 g (med däck utan drivring)
Hjuldimensioner	22", 24" or 25"
Lufttryck	9 bar eller PU-däck
Stolbredds ökning	Ökning ca. 3 cm
Max brukarvikt	125 kg

ARTIKELNUMMER

Axel längd	46 mm	51mm
Gearwheel 22"	GW22K	GW22L
Gearwheel 24"	GW24K	GW24L
Gearwheel 25"	GW25K	GW25L

TILLVAL ANNAN DÄCKUTRUSTNING

Utan däck	-0
Finmönstrad däck, bredd 1"	-1
Grovsmönstrad däck, bredd 1"	-2
Grovsmönstrad däck, bredd 1 3/8"	-3

Exempel: 24" Gearwheel utan däck: GW24K-0



Finmönster



Grovsmönster



PU däck

EKERSKYDD

Ekerskydd 22"	GW4000-01
Ekerskydd 24"	GW4000-02
Ekerskydd 25"	GW4000-03




Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se

GEARWHEEL


Drivringar

5-Popnuts infästning

	22"	24"	25"
Aluminium	DR5053	DR5001	DR5101
Friktion S	DR5057	DR5007	DR5107
Poly kompakt – platt	DR5050	DR5005	DR5105
Poly kompakt – rund	DR5050-1	DR5005-1	DR5105-1
Poly Gele – platt	DR5051	DR5006	DR5106
Poly Gele – rund	DR5051-1	DR5006-1	DR5106-1
Titan 16 mm	DR5054	DR5003	DR5103
Titan 19 mm	DR5056	DR5004	DR5104
Max Grip	DMG225	DMG244	DMG254

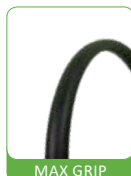

Ytterliga information angående drivringar hittar man i kapitel "Drivringar".

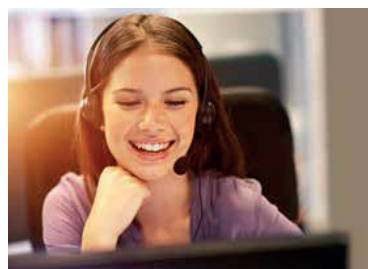

**HAR DU FRÅGOR ELLER VILL
BESTÄLLA?**

+46 (0) 345 408 80 – Vi hjälper dig gärna!

Checklista för att beställa

- ☐ För standardutrustning se "Vad får jag när jag beställer Gearwheel"
- ☐ Beställa den nödvändiga adaptern
Om den nödvändiga adapterna inte finns vår hemsida kontakta oss, så hjälper vi dig
- ☐ Välj typ av drivring
- ☐ Välj typ av däck
- ☐ Kontrollera din orderbekräftelse, om något är fel eller oklart kontakta oss omedelbart
- ☐ När du får dina produkter, vänligen kontrollera förpackningen för skador. Om så är fallet, kontakta oss innan du skriver under för att ta emot produkter.



 **decon**
www.decon.se

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 - Fax: +46 (0)345 40895

E-mail: info@decon.se

Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
Alla rättigheter är reserverade för Decon. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.